



Angelguide[®]

Fio Guia Pré-formatado

**Retenção de formato
da Curva para
Segurança e Controle**

Desenhado para **TAVI**



Shanghai MicroPort CardioFlow Medtech Co., Ltd.

1601 ZhangDong Rd. ZJHi-Tech Park Shanghai 201203 P.R.China

T: (86) (21) 38954600

F: (86) (21) 50801305

www.cardioflowmedtech.com




Angelguide®

Fio Guia Pré-formatado

Retenção de formato




- O desenho de dupla curva absorve a força de contração do ventrículo esquerdo, garantindo estabilidade e segurança durante a liberação da Válvula VitaFlow.

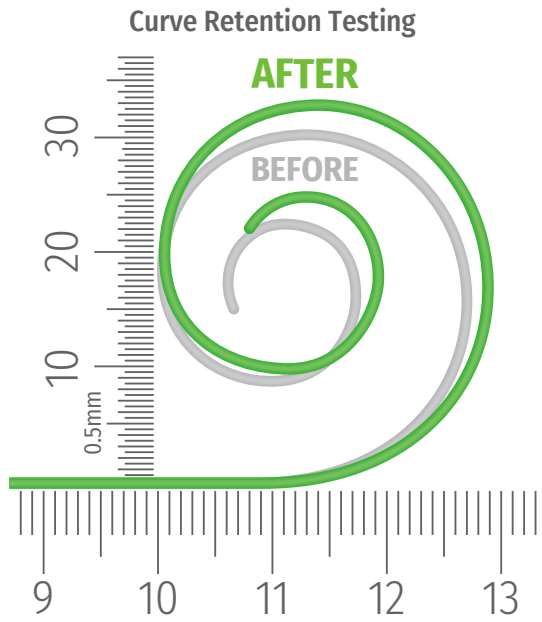

- Retenção de curva superior e manutenção da geometria durante a compressão.

Desenhado para TAVI


- Fio Guia pré-formatado para ancoramento aperfeiçoado no ventrículo esquerdo, com curva pequena desenhada para ventrículos pequenos e/ou hipertóficos.

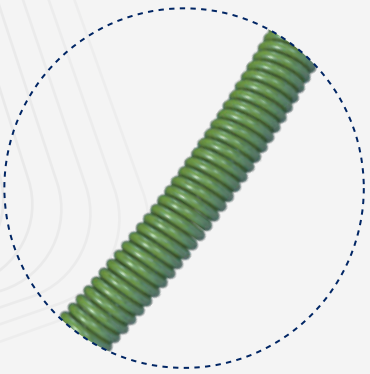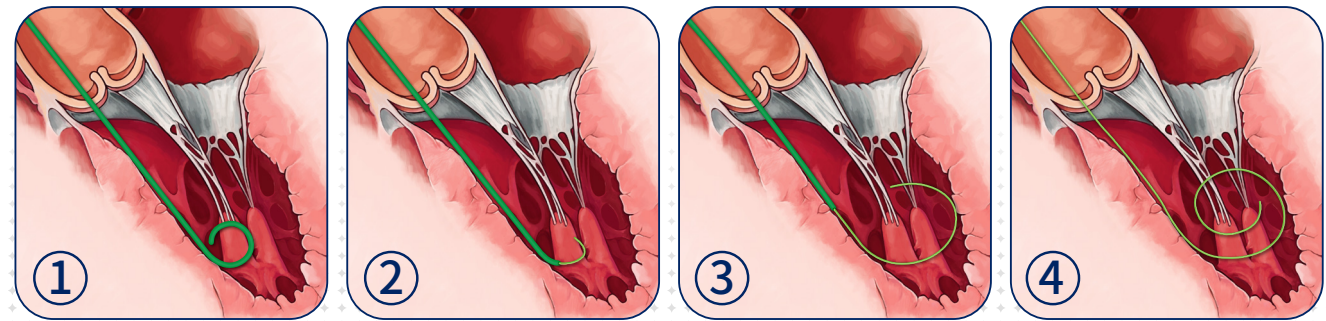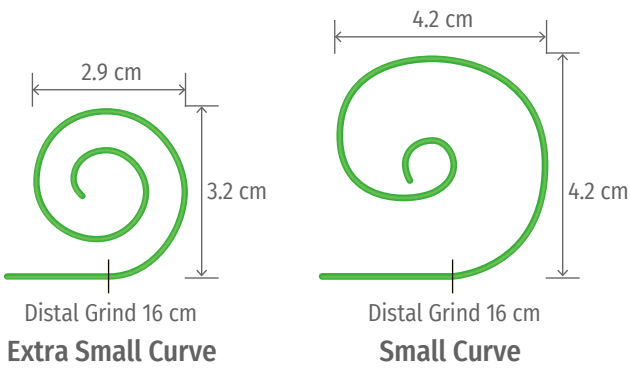

- Trilho de suporte combinado com revestimento otimizado para reduzir fricção, desenhado para prover firmeza adequada durante a liberação da válvula, enquanto minimiza a deflexão do fio guia.

Afunilamento suave para Segurança e Controle

- Afunilamento suave do núcleo distal para alto suporte da ponta distal do fio.

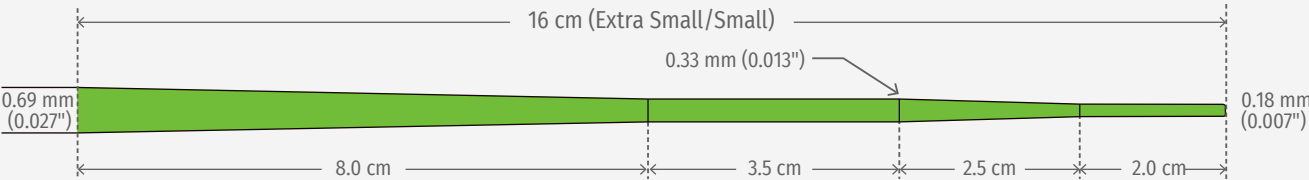

Produto	Númeração	Diâmetro Externo (inch)	Altura da Curva (mm)	Comprimento (cm)
Angelguide®-s	PS-35-275S	0.035	42	275
Angelguide®-xs	PS-35-275XS	0.035	32	275

